

CLARITY™ | SL

Самолигирующаяся система брекетов



3M

3M Unitek
Ортодонтическая продукция
121614, Москва,
ул. Крылатская, д. 17, стр.3
Бизнес-Парк «Крылатские Холмы»
Тел.: (495) 784-74-74
Факс: (495) 784-74-75
www.3MRussia.ru
www.3MUnitek.com

©3M 2007. Все права защищены.

3M Unitek
from the 3M Health Care family

БЕСКОМПРОМИСНОЕ

Решение

Эстетическая, абсолютно пассивная самолигирующаяся система-брекетов,
дающая Вам всё необходимое для ортодонтического лечения.

CLARITY™ | SL

Самолигирующаяся система брекетов



 SMARTCLIP™  APC™

3M Unitek

Эффективность, которая не останется незамеченной. Ясность выбора.

На каждом из этапов, от консультации пациента и вплоть до снятия брекетов, Вы будете отмечать преимущества брекетов Clarity™ SL. Эта система вобрала в себя всё самое хорошее от пассивного самолигирования, традиционного дизайна брекета и эстетики брекетов Clarity, что гарантирует положительные результаты, которые ждёте Вы и Ваш пациент.



- Преимущества во время консультации пациента
- Точное позиционирование брекета
- Надёжная сила фиксации
- Улучшенное выравнивание по горизонтали и вертикали
- Эффективное закрытие промежутков
- Точная детализация
- Лёгкое снятие брекетов


CLARITY™ | SL

Самолигирующаяся система брекетов

Консультация пациента

Предложите Вашему пациенту интересный вариант

С чего начинается ортодонтическое лечение? – С согласия пациента. В дизайне брекетов Clarity™ SL учитываются все те моменты, которые столь важны для пациента, и всё то, что нужно для работы врача-ортодонта. Это техника, дающая результаты.

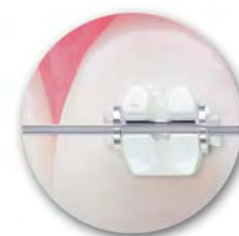

Эстетический брекет:

- Превосходная эстетика
- Отсутствие окрашивающихся лигатур




Удобство самолигирования:

- Возможность увеличить интервалы между визитами
- Возможность ускорить процесс ортодонтического лечения
- Возможность сократить время визита



Гигиена и комфорт:

- Дизайн брекета удобный для пациента; закруглённые углы
- Отсутствие эластичных лигатур, которые могут спровоцировать появление зубного камня или налета
- Открытый паз брекета

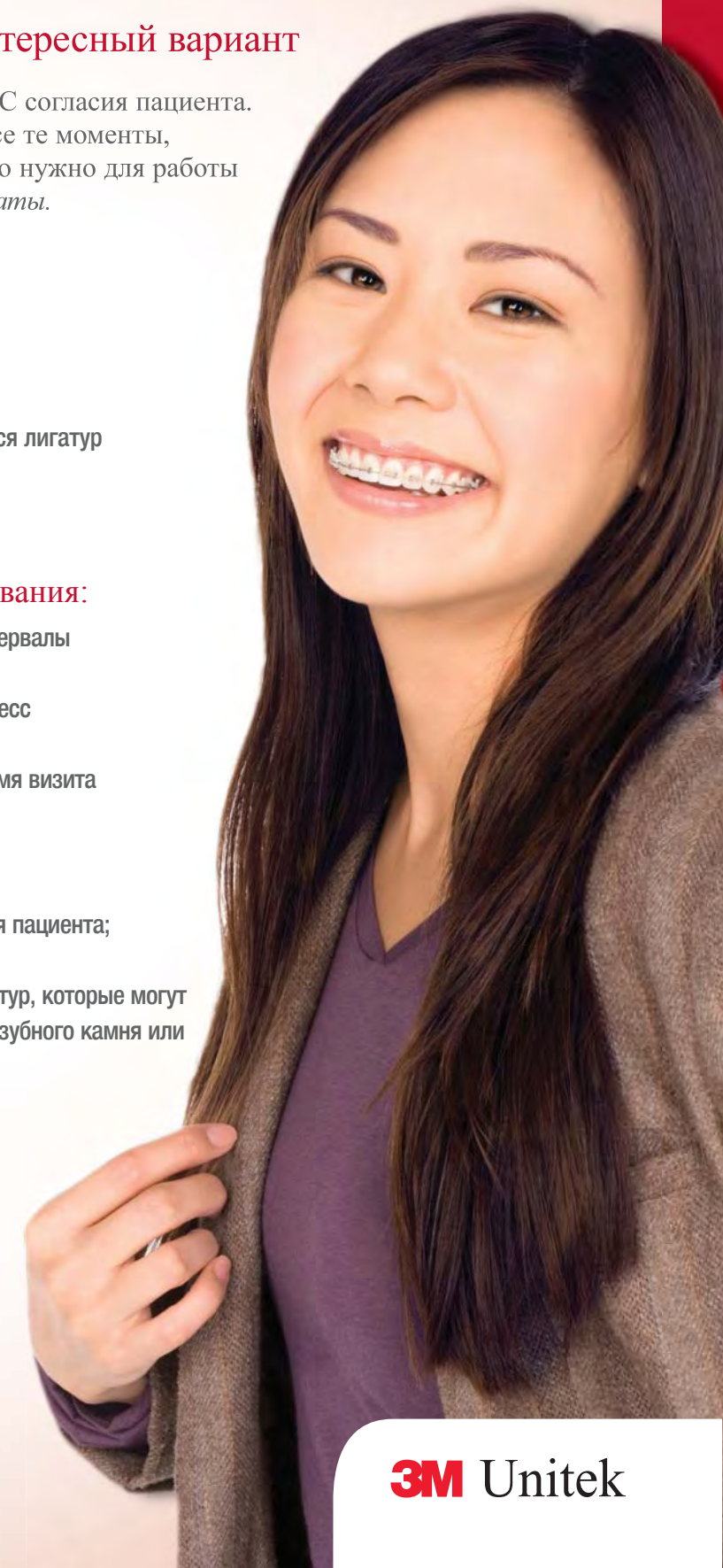

3M Unitek

Позиционирование

Точное позиционирование брекетов

Позиционирование брекетов – важный фактор для эффективного ортодонтического лечения. И многие врачи согласятся, что при использовании самолигирующейся техники данный фактор становится ещё более важным, так как речь идёт о больших интервалах между визитами. Самолигирующиеся брекеты Clarity™ SL обладают уникальными характеристиками, помогающими Вам максимально точно спозиционировать брекет.



Факторы, влияющие на позиционирование брекетов:

- Традиционный дизайн брекетов
- Открытый металлический паз в самолигирующихся брекетах
- Мезиальные и дистальные клипсы могут служить как осевые индикаторы
- Брекеты могут предлагаться в системе APC™ PLUS, в основу которой входит цветоизменяющийся светоотверждаемый адгезив.
- Анатомический контур базы




Какие преимущества Вы отметите в день фиксации

Сила фиксации может стать критическим фактором для самолигирующейся механики. С самолигирующимися брекетами Clarity™ SL Вы получаете надёжную силу фиксации.



Основание брекета Clarity SL

- Анатомический контур базы для лучшей фиксации на поверхности зуба
- Микрористаллическая поверхность основания брекета
- Возможность фиксации брекета прямым и непрямым способом

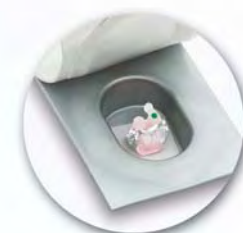

Система APC

- Система, сокращающая количество этапов фиксации брекетов
- Индивидуальная упаковка для каждого брекета с полной информацией о брекете (тип брекета, зуб, прескрипция, паз)
- Цветоизменяющийся адгезив розового цвета, позволяющий более аккуратно удалить излишки



Этап выравнивания

Улучшенное выравнивание по горизонтали и вертикали

Для исправления скученности и неправильного прикуса не достаточно лишь лёгких сил самолигирующей системы. Здесь необходим чёткий план лечения и система брекетов, которая может гарантировать Вам те результаты, которые Вы ожидаете на этапе планирования. Уникальный дизайн самолигирующихся брекетов Clarity™ SL и станет этой гарантией.



Абсолютно пассивная система брекетов:

- Запрограммированная самолигирующаяся клипса, позволяющая контролировать силы дуг
- Открытый паз, как у традиционных брекетов



Контроль ротации

- Опорная площадка клипсы улучшает контроль ротации
- Ширина брекета способствует контролю ротации



Контроль ангуляции

- Точный контроль размера паза для четкого контроля ангуляции
- Ширина брекета способствует дополнительному контролю ангуляции



«Гибкий» подход

- Выборочное лигирование дуги для оптимизации межбукетного расстояния
- Лигирование по потребности эластичной лигатурой
- Возможность использования дополнительных приспособлений для регулирования сил
- Функциональный вертикальный паз

Закрытие промежутков

Заставьте систему работать на Вас

Что нужно для эффективного ортодонтического лечения? Сбалансированный подход к биомеханике скольжения, контролю торка и опоры. Характеристики брекетов Clarity™ SL помогут Вам достичь необходимого баланса между требованиями к лечению со стороны врача и предпочтений со стороны пациента.



Механика скольжения

- Пассивная механика даже на этапе использования больших дуг
- Выборочное лигирование дуги
- Шарообразный крючок для лучшей функциональности



Контроль торка

- Паз, гарантирующий эффективный контроль торка
- Торк в базе
- Уникальный дизайн крыльев способствует лучшему контролю торка
- Более крепкий материал керамики способствует силе торка



Замена дуг

- Уникальная нитиноловая самолигирующаяся клипса, сводящая процесс установки дуги к одному этапу
- Инструменты для установки и замены дуг



Окончание лечения

Самые главные преимущества самолигирующихся брекетов Clarity SL Вы отметите на завершающих этапах лечения

В отличие от других пассивных самолигирующихся систем, брекеты Clarity™ SL сохранили дизайн традиционных брекетов, что поможет Вам провести этап детализации привычным Вам способом.



Традиционный дизайн брекета

- Единственные эстетические самолигирующиеся брекеты, сохранившие дизайн классических брекетов
- Четыре крыла с обширной и функциональной областью под крылом
- Открытый паз
- Функциональный вертикальный паз



Предсказуемое передвижение зубов

- Оптимизированная толщина площадки
- Размер паза
- Брекеты, разработанные под каждый зуб

Снятие брекетов

Эффективность и предсказуемость

Самолигирующиеся брекеты Clarity™ SL снимаются так же просто, как и фиксируются.



Технология, которой Вы можете доверять

- Основа с концентратором напряжения, как у традиционных брекетов Clarity
- Брекеты Clarity™ SL можно снимать, не убирая дуги
- Уникальный концентратор напряжения, позволяющий снять брекеты как металлический



Инструмент Unitek™ для снятия самолигирующихся брекетов


- Оптимальные силы при мезио-дистальном сжатии
- Универсальный дизайн, позволяющий снять брекеты, не вытаскивая из него дуги
- Инструмент можно использовать как с брекетами Clarity SL, так и с брекетами SmartClip™



Характеристики

Ключевые особенности брекетов Clarity SL

Самолигирующиеся брекеты Clarity™ SL стали синергией традиционных керамических брекетов Clarity™ и самолигирующихся брекетов SmartClip™.

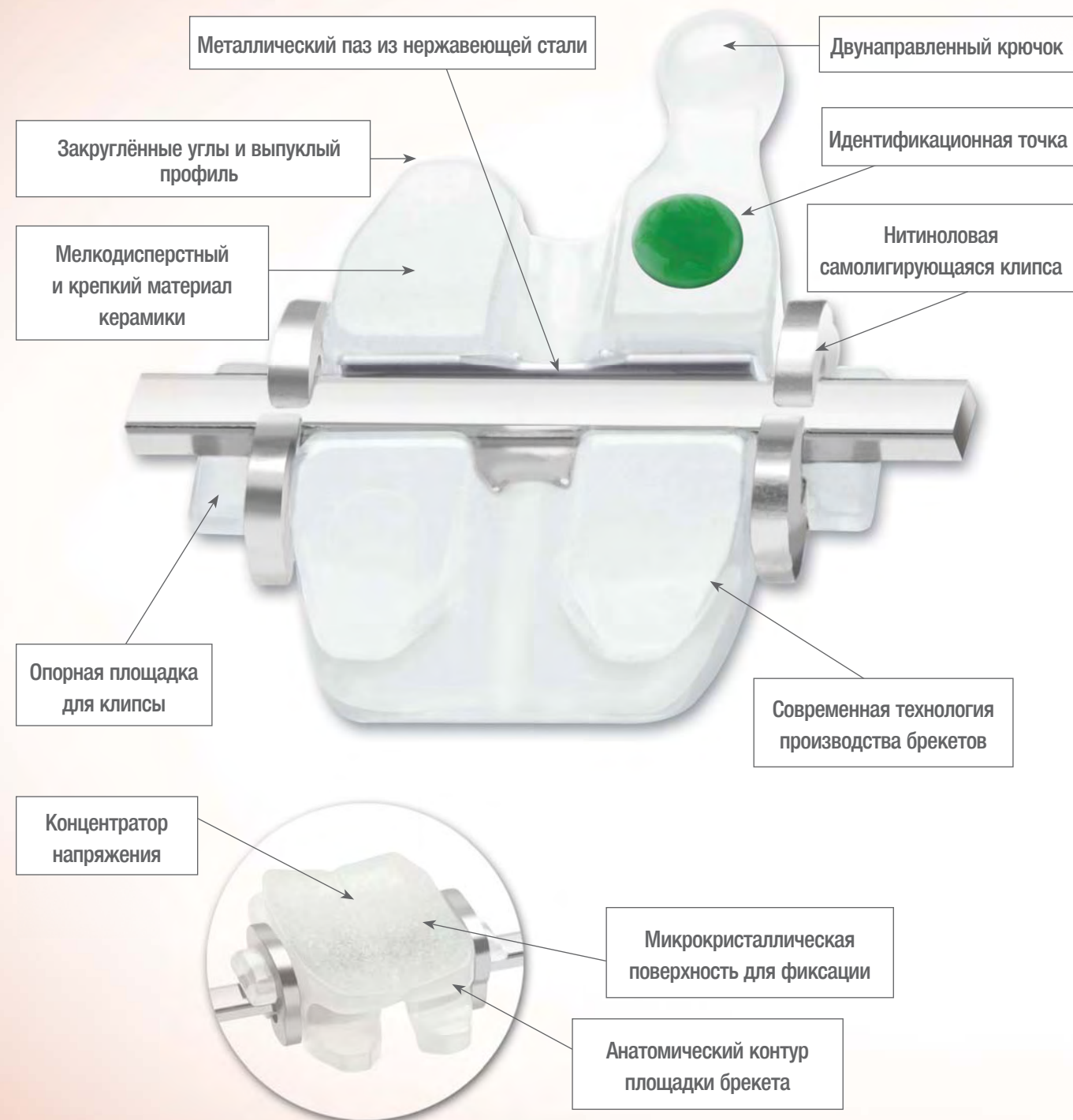

Традиции



Традиции находить ответ

Каждый день миллионы людей во всём мире отдают предпочтение продуктам компании 3M, таким как: клейкие ленты Scotch® , листочки для заметок Post-it® Notes и пластыри Nexcare™ , исключительному качеству и передовым технологиям брендов Scotch-Brite®, Scotchgard™ и Filtrete™ . Самолигирующиеся брекеты Clarity SL – ещё один передовой продукт корпорации 3M.

3M на базе своих высококачественных технологий продолжает исследования, направленные на создание новых и более совершенных продуктов для стоматологии. Самолигирующаяся система брекетов Clarity SL стала очередным пунктом в длинном списке профессиональных решений для стоматологии и ортодонтии, куда уже вошли реставрационные материалы, адгезивы, коронки, материалы для снятия оттисков и многое другое.